

PRODUCT INFORMATION

VizOpti® Preservative-Free Irritated Eye Drops



AVAILABLE LANGUAGES



English



Dansk



Svenska



Norsk



Suomi



Íslenska

© 2018 All rights reserved. VizOpti is a registered trademark of VizOpti Ltd.

Instructions for Use

VizOpti Preservative-Free Irritated Eye Drops

Soothing relief for eyes irritated by pollen, allergies and other irritants

RELIEF

For irritated itchy eyes caused by factors such as hay fever, allergens, dust, pollution, air conditioning , smoke and bright lights

INSTANT SOOTHING AND COOLING

For irritated eyes: Relieves itching, burning grittiness and discomfort

EXPERT FORMULATION

With Natural Plant Extracts of Calendula and Hamamelis

PRESERVATIVE FREE

Ideal if you need to apply drops more frequently, have sensitive eyes or wear contact lenses

DESCRIPTION

The product is a clear solution, supplied in 10 ml /15 ml OSD Preservative free container (blue cap)

MODEL DETAILS

Formulation code: IRRITPF

INGREDIENTS

Sodium chloride 0.75%, calendula extract and hamamelis extract, disodium EDTA in a borate buffer 0.125%

DIRECTIONS FOR USE

- Ensure your hands are clean and dry before use
- Shake before use
- Check the bottle seal is not broken or missing before use. To open the bottle: Twist the cap anti-clockwise to break the seal.
- Tilt your head backwards and gently squeeze 1 to 2 drops into the eye
- Blink several times to cleanse the eye
- Repeat for the other eye as necessary.
- Replace cap after use.
- May be used prior to and following contact lens wear. May be used prior to and following contact lens wear.
- Use as often as required / safe for everyday use
- Compatible with contact lenses

WARNINGS:

- The product is sterile until first opened
- Do not use if tamper-evident seal is missing or broken.
- Do not swallow the solution
- If eye irritation occurs, discontinue use and consult an eye care practitioner. If condition worsens, consult a specialist.
- If you have been diagnosed with a medical eye condition or are using other eye medication, consult a healthcare professional before use.

- Do not use if allergic to any of the ingredients.
- May cause temporary blurring of vision, if affected do not drive or perform skilled tasks until vision is clear.
- For use in the eyes only
- This product should not be used to soak or disinfect contact lenses
- To avoid contamination, do not touch the dropper tip.
- Use within 90 days of first opening / Once opened, discard after 90 days
- Do not use after the expiry date
- For adults - May be used by children younger than 16 years under supervision

This product should not be used on children younger than 2 years without medical advice as it contains boron and may impair fertility in the future.

In the event of a serious incident occurring during the use of this medical device or as a result of its use, please report the incident to the manufacturer and the Competent Authority of the Country in which you are located

KEEP OUT OF SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

STORAGE

Store between 5 °C and 30 °C

Avoid direct sunlight.

Do not use if package is open or damaged



East Midlands Pharma Ltd
Unit 1 Rothley Lodge, Loughborough Road
Rothley, Leicestershire, LE7 7NL, UK



Advena Ltd, Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013
Malta



2797



Revision History

Rv	Date	Description
01	04 June 2026	New electronic Instructions for Use (brand specific)

Brugervejledning

VizOpti-øjendråber mod irriterede øjne uden konserveringsmidler

Beroligende lindring for øjne, der er irriteret af pollen, allergier og andre irriterende stoffer

LINDRING

Til irriterede, kløende øjne, der skyldes faktorer såsom høfeber, allergener, støv, forurening, luftkonditionering, røg og stærke lys

ØJEBLIKKEG BEROLIGELSE OG KØLING

Til irriterede øjne: Lindrer kløe, brændende fornemmelse og ubehag

EKSPERTFORMULERING

Med naturlige planteekstrakter af morgenfrue og hamamelis

UDEN KONSERVERINGSMIDLER

Ideel, hvis du påfører dråber hyppigere, har følsomme øjne eller bruger kontaktlinser

BESKRIVELSE

Produktet er en klar opløsning, der leveres i en 10 ml/15 ml OSD (levering af oftalmologisk opløsning)-beholder uden konserveringsmidler (blå hætte)

MODELOPLYSNINGER

Formuleringskode: IRRITPF

INGREDIENSER

Natriumklorid 0,75 %, morgenfrueekstrakt og hamamelisekstrakt, dinatrium-EDTA i en boratbuffer på 0,125 %

BRUGSANVISNING

- Sørg for, at dine hænder er rene og tørre før brug
- Ryst før brug
- Kontrollér, at flaskens segl er intakt og ikke mangler før brug. Sådan åbner du flasken: Vrid hætten mod uret for at bryde seglen.
- Bøj hovedet bagud, og dryp forsigtigt 1-2 dråber i øjet
- Blink flere gange for at rense øjet
- Gentag med det andet øje efter behov.
- Sæt hætten på igen efter brug.
- Kan anvendes før og efter brug af kontaktlinser. Kan anvendes før og efter brug af kontaktlinser.
- Brug så ofte, som du har brug for/som det er sikkert at gøre det til daglig brug
- Kompatibel med kontaktlinser

ADVARSLER:

- Produktet er sterilt, indtil det åbnes første gang
- Må ikke bruges, hvis der er tydelige tegn på manipulation af seglen, eller hvis seglen mangler eller er brudt.
- Opløsningen må ikke synkes
- Hvis der opstår øjenirritation, skal du ophøre brugen og søge øjenlæge. Hvis tilstanden forværres, skal du søge en specialist.
- Hvis du er blevet diagnosticeret med en medicinsk øjentilstand eller bruger andre øjenmediciner, skal du kontakte en læge før brug.
- Må ikke bruges, hvis du er allergisk over for nogen af ingredienserne.
- Kan forårsage midlertidigt sløret syn. Hvis synet påvirkes, må du ikke køre bil eller udføre krævende opgaver, før synet er klart.
- Kun til brug i øjnene
- Produktet må ikke bruges til at nedsænke eller desinficere kontaktlinser
- Rør ikke ved dråbespiden for at undgå forurening.
- Bruges inden for 90 dage efter åbning. Når den er åbnet, skal den kasseres efter 90 dage
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen
- For voksne – kan anvendes af børn under 16 år under opsyn

Produktet bør ikke anvendes til børn under 2 år uden medicinsk rådgivning, da det indeholder bor og kan forringe forplantningsevnen i fremtiden.

I tilfælde af en alvorlig hændelse, der opstår under brugen af denne medicinske enhed eller som følge af dens brug, bedes du rapportere hændelsen til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor du befinder dig

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

OPBEVARING

Opbevares mellem 5 °C og 30 °C

Undgå direkte sollys.


Må ikke anvendes, hvis emballagen er åben eller beskadiget



East Midlands Pharma Ltd
Unit 1 Rothley Lodge, Loughborough Road
Rothley, Leicestershire, LE7 7NL, Storbritannien



Advena Ltd, Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

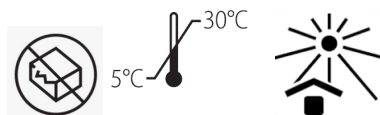

2797



Revisionshistorik

Rev.	Dato	Beskrivelse
01	4. juni 2026	Ny elektronisk brugervejledning (mærkespecifik)

Käyttöohjeet

Säilöntäaineettomat VizOpti-silmätipat ärtyneisiin silmiin

Lievittää siitepölystä, allergioista ja muista ärsyttävistä tekijöistä ärtyneitä silmiä

HELPOTUS

Ärtyneille, kutiaville silmille, jotka ärtyvät esimerkiksi heinänuhasta, allergioista, pölystä, saasteista, ilmastointilaitteista, savusta ja kirkkaista valoista.

RAUHOITTAJAA JA VILENTÄÄ VÄLITTÖMÄSTI

Ärtyneille silmille: Lievittää kutinaa, kirvelyä, hiekantunnetta ja epämukavuutta

ASIAANTUNTEVA KOOSTUMUS

Sisältää luonnollisia kehäkukka- ja hamamelis-kasviuutteita

SÄILÖNTÄAINEETON

Sopii ihanteellisesti, jos tarvitset tippoja useammin, sinulla on herkät silmät tai käytät piilolinssijä.

KUVAUS

Tuote on kirkas liuos, joka toimitetaan 10 ml / 15 ml säilöntäaineettomassa OSD-pullossa (sininen korkki).

MALLIN TIEDOT

Formulaatiokoodi: IRRITPF

AINESOSAT

Natriumkloridi 0,75 %, kehäkukkauute ja hamamelis-uute, dinatrium-EDTA boraattipuskurissa 0,125 %.

KÄYTTÖOHJEET

- Varmista ennen käyttöä, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat.
- Ravista ennen käyttöä
- Tarkista ennen käyttöä, ettei pullon sinetti ole rikki tai puuttu. Pullon avaaminen: kierrä korkkia vastapäivään rikkoaksesi sinetin.
- Kallista päätä taaksepäin ja purista silmään varovasti 1–2 tippaa.
- Räpäytä silmää useita kertoja silmän puhdistamiseksi.
- Toista toiseen silmään tarpeen mukaan.
- Aseta korkki takaisin käytön jälkeen.
- Voidaan käyttää ennen piilolinssien käyttöä ja niiden jälkeen. Voidaan käyttää ennen piilolinssien käyttöä ja niiden jälkeen.
- Käytä niin usein kuin on tarpeen/turvallista jokapäiväiseen käyttöön.
- Yhteensopiva piilolinssien kanssa

VAROITUKSET:

- Tuote on steriili ensimmäiseen avaamiseen saakka
- Älä käytä, jos sinetti puuttuu tai on rikki.
- Älä niele liuosta
- Jos silmä-ärsytys jatkuu, lopeta käyttö ja ota yhteyttä silmälääkäriin. Jos tila pahenee, ota yhteys asiantuntijaan.
- Jos sinulla on diagnosoitu silmäsairaus tai käytät muita silmälääkkeitä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ennen käyttöä.
- Älä käytä, jos olet allerginen jollekin ainesosalle.
- Saattaa aiheuttaa tilapäistä näön hämärtymistä. Jos näin käy, älä aja tai suorita ammattitaitoa vaativia tehtäviä, ennen kuin näkö on kirkastunut.
- Käytetään ainoastaan silmiin
- Tätä tuotetta ei saa käyttää piilolinssien liottamiseen tai desinfiointiin
- Älä koske tippakärkeen kontaminaation välttämiseksi.
- Käytä 90 päivän kuluessa avaamisesta / Hävitä avaamisen jälkeen 90 päivän kuluttua
- Älä käytä vanhentumispäivämäärän jälkeen
- Aikuisille - Alle 16-vuotiaat lapset voivat käyttää valvonnassa

Tätä tuotetta ei saa käyttää alle 2-vuotiaalle lapsille ilman lääkärin ohjeita, koska se sisältää booria ja voi heikentää hedelmällisyyttä tulevaisuudessa.

Jos tämän lääkinnällisen laitteen käytön aikana tai sen seurauksena tapahtuu vakava vaaratilanne, ilmoita siitä valmistajalle ja sijaintimaasi toimivaltaiselle viranomaiselle

PIDÄ POISSA LASTEN NÄKYVILTÄ JA ULOTTUVILTA.

SÄILYTYS

Säilytä 5 °C - 30 °C välillä

Vältä suoraa auringonvaloa.

Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut



East Midlands Pharma Ltd
Unit 1 Rothley Lodge, Loughborough Road
Rothley, Leicestershire, LE7 7NL, UK



5°C 30°C



Advena Ltd, Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



2797



Versiohistoria

Tarkastus-	päivämäärä	Kuvaus
01	4. kesäkuuta 2026	Uudet sähköiset käyttöohjeet (merkkikohtainen)

Notkunarleiðbeiningar

VizOpti Rotvarnarlausir augndropar fyrir ert augu

Róandi léttir fyrir augu sem eru ertuð af frjókornum, ofnæmi og öðrum ertandi efnum

LÉTTIR Á

Fyrir ert og kláðafull augu af völdum þátta eins og heymæði, ofnæmisvalda, ryks, mengunar, loftkælingar, reyks og skærs ljóss.

SAMSTUNDIS RÓANDI OG KÆLANDI ÁHRIF

Fyrir ert augu: Dregur úr kláða, sviða, sandkenndri tilfinningu og óþægindum

SÉRFRÆÐILEGA SAMSETT FORMÚLA

Með náttúrulegum útdrætti úr calendula og hamamelis

ROTAVNARLAUS

Tilvalið ef þú þarft að nota augndropana oft, ert með viðkvæm augu eða notar augnlinsur

LÝSING

Varan er tær lausn sem er afhent í 10 ml / 15 ml OSD rotvarnarlausu íláti (með bláu loki).

UPPLÝSINGAR UM LÍKANID

Formúlukóði: IRRITPF

INNIHALDSEFNI

Natríumklóríð 0,75%, Calendula þykkni og Hamamelis þykkni, tvínatríum EDTA í bóratjafnalausn 0,125%.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

- Gakktu úr skugga um að hendurnar séu hreinar og þurrar fyrir notkun.
- Hristið fyrir notkun
- Gakktu úr skugga um að flöskuinnsiglið sé ekki rofið eða vanti fyrir notkun. Til að opna flöskuna: Til að opna flöskuna: snúðu tappanum rangsælis til að rjúfa innsiglið.
- Hallaðu höfðinu aftur á bak og kreistu 1 til 2 dropa varlega í augað.
- Blikkaðu nokkrum sinnum til að hreinsa augað.
- Endurtaktu fyrir hitt augað eftir þörfum.
- Skiptu um tappa eftir notkun.
- Má nota fyrir og eftir notkun augnlinsa. Má nota fyrir og eftir notkun augnlinsa.
- Notið eins oft og þörf krefur/ öruggt er fyrir daglega notkun.
- Samhæft við snertilinsur

VARNAÐARORÐ:

- Varan er dauðhreinsuð þar til hún er fyrst opnuð.
- Ekki nota ef innsigli vantar eða þegar það er rofið.
- Ekki gleypa lausnina.
- Ef erting í augum á sér stað skal hætta notkun og ráðfæra sig við augnlækni. Ef ástandið versnar skaltu ráðfæra þig við sérfræðing.
- Ef þú hefur greinst með sjúkdóm í auga eða notar önnur augnlyf skaltu ráðfæra þig við heilbrigðisstarfsmann fyrir notkun.
- Ekki nota ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna.
- Getur valdið tímabundinni þokusýn. Ef það gerist skal ekki aka eða framkvæma verkefni sem krefjast færni fyrr en sjónin er orðin skýr.
- Eingöngu til notkunar í augum.
- Ekki ætti að nota þessa vöru til að bleyta eða sótthreinsa augnlinsur.
- Til að koma í veg fyrir mengun skaltu ekki snerta dropateljarann.
- Notið innan 90 daga frá fyrstu opnun / Fargið eftir 90 daga frá opnun
- Notið ekki eftir fyrningardagsetningu.
- Fyrir fullorðna - Má nota af börnum yngri en 16 ára undir eftirliti

Þessa vöru ætti ekki að nota á börn yngri en tveggja ára án læknisráðs þar sem hún inniheldur bór og getur haft áhrif á frjósemi í framtíðinni.

Komi upp alvarlegt atvik sem á sér stað við notkun þessa lækningatækis skal tilkynna það til framleiðanda og lögbærs yfirvalds í landinu þar sem þú ert staðsettur.

GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI SJÁ NÉ NÁ TIL.

GEYMSLA

Geymið við hitastig á bilinu 5°C til 30 °C

Forðist beint sólarljós.

Ekki nota ef umbúðir eru opnar eða skemmdar



East Midlands Pharma Ltd
Unit 1 Rothley Lodge, Loughborough Road
Rothley, Leicestershire, LE7 7NL, UK



5°C 30°C



Advena Ltd, Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



2797



Endurskoðunarsaga

Útgáfa	Dagsetning	Lýsing
01	4. júní 2026	Nýjar rafrænar notkunarleiðbeiningar (til sérstakrar vörumerkja)

Bruksanvisning

VizOpti øyedråper mot irritasjon uten konserveringsmidler

Beroligende lindring for øyne irritert av pollen, allergier og andre irritasjonsmomenter

LINDRING

For øyeirritasjon som forårsakes av høysnue, allergener, støv, forurensning, aircondition, røyk og sterke lys

ØYEBLIKKELEG BEROIGENDE OG KJØLENDE

For irriterte øyne: Lindrer kløe, svie og ubehag

EKSPERTFORMULERING

Med naturlige planteekstrakter av ringblomst og trollhassel

UTEN KONSERVERINGSMIDLER

Passer perfekt hvis du må påføre dråper ofte, har sensitive øyne eller bruker kontaktlinser

BESKRIVELSE

Produktet er en klar løsning, levert i en 10 ml / 15 ml OSD-beholder uten konserveringsmidler (blå kork)

MODELLDETALJER

Formuleringskode: IRRITPF

INGREDIENSER

Natriumklorid 0,75 %, ringblomstekstrakt og trollhasselekstrakt, dinatrium EDTA i en borat bufferløsning 0,125 %

BRUKSANVISNING

- Pass på at hendene dine er rene og tørre før bruk
- Rist før bruk
- Kontroller at flaskeforseglingen ikke er brutt eller mangler før bruk. Åpne flasken ved å vri korken mot klokken for å bryte forseglingen.
- Legg hodet bakover og klem forsiktig ut 1 til 2 dråper i øyet
- Blunk flere ganger for å rense øyet
- Gjenta for det andre øyet etter behov.
- Sett på korken etter bruk.
- Kan brukes før og etter bruk av kontaktlinser. Kan brukes før og etter bruk av kontaktlinser.
- Bruk så ofte som nødvendig/trygt for daglig bruk
- Kompatibel med kontaktlinser

ADVARSLER:

- Produktet er sterilt til det åpnes
- Må ikke brukes dersom forseglingen mangler eller er brutt.
- Ikke svelg løsningen
- Dersom øyeirritasjon oppstår, må du avslutte bruken og kontakte en optiker. Ta kontakt med en spesialist dersom tilstanden forverrer seg.
- Dersom du har øyesykdommer eller bruker annen øyemedisin, må du kontakte helsepersonell før bruk.
- Må ikke brukes dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene.
- Kan forårsake midlertidig uklart syn. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre eller utføre arbeidsoppgaver før synet blir klart igjen.
- Må kun brukes på øynene
- Dette produktet må ikke brukes til å desinfisere kontaktlinsene eller til å bløtlegge dem
- For å unngå smitte må du ikke ta på tuppen av dråpetelleren.
- Brukes innen 90 dager etter første åpning / Kast etter 90 dager etter åpning
- Ikke bruk etter utløpsdatoen
- For voksne – Kan brukes av barn under 16 år under tilsyn

Dette produktet bør ikke brukes på barn under 2 år hvis det ikke er spesifikt anbefalt av helsepersonell, da det inneholder bor og kan svekke fertiliteten i fremtiden.

Dersom alvorlige hendelser skulle oppstå som et resultat av bruken av dette medisinske utstyret, må du rapportere hendelsen til produsenten og ansvarlige myndigheter i det landet der du bor

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

OPPBEVARING

Oppbevares mellom 5 °C og 30 °C

Unngå direkte sollys.

Ikke bruk hvis pakken er åpen eller skadet



East Midlands Pharma Ltd
Enhet 1 Rothley Lodge, Loughborough Road
Rothley, Leicestershire, LE7 7NL, UK



5°C 30°C



Advena Ltd, Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



2797



Revisjonshistorikk

Ver.	Dato	Beskrivelse
01	4. juni 2026	Ny elektronisk bruksanvisning (merkespesifikk)

Bruksanvisning

VizOpti ögondroppar utan konserveringsmedel mot ögonirritation

Lindrane för ögon som är irriterade av pollen, allergier och andra irriterande ämnen

LINDRING

Vid irriterade och kliande ögon orsakade av faktorer som hösnuva, allergener, damm, luftföroreningar, luftkonditionering, rök och starkt ljus

OMEDELBART LUGNANDE OCH SVALKANDE

Vid irriterade ögon: lindrar klåda, brännande känsla och obehag

EXPERTUTVECKLAD SAMMANSÄTTNING

Med naturliga extrakt av ringblomma och trollhassel

UTAN KONSERVERINGSMEDEL

Perfekt om du behöver använda ögondroppar oftare, har känsliga ögon eller använder kontaktlinser

BESKRIVNING

Produkten är en genomskinlig lösning som levereras i en behållare på 10 eller 15 ml, utan konserveringsmedel och med ett blått lock

MODELLINFORMATION

Formuleringskod: IRRITPF

INGREDIENSER

Natriumklorid 0,75 %, extrakt av ringblomma, extrakt av trollhassel och EDTA-dinatrium i en boratbuffert på 0,125 %

BRUKSANVISNING

- Se till att dina händer är rena och torra före användning
- Skaka före användning
- Kontrollera att flaskans försegling inte är bruten eller saknas före användning. Så här öppnar du flaskan: Vrid locket moturs tills förseglingen bryts.
- Luta huvudet bakåt och tryck försiktigt ut 1–2 droppar i ögat
- Blinka flera gånger för att rengöra ögat
- Upprepa stegen för det andra ögat vid behov.
- Skruva på locket igen efter användning.
- Kan användas före och efter användning av kontaktlinser. Kan användas före och efter användning av kontaktlinser.
- Använd efter behov/säker för daglig användning
- Kan användas med kontaktlinser

VARNINGAR:

- Produkten är steril tills den öppnas för första gången
- Använd inte om säkerhetsförseglingen saknas eller är trasig.
- Svälj inte vätskan
- Om ögonirritation uppstår ska du sluta använda produkten och kontakta en ögonläkare. Kontakta en specialist om tillståndet förvärras.
- Om du har fått en diagnos om en ögonsjukdom eller använder andra ögonläkemedel bör du rådfråga vårdpersonal innan du använder produkten.
- Använd inte om du är allergisk mot någon av ingredienserna.
- Kan orsaka tillfällig dimsyn. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän synen har klarnat.
- Får endast användas i ögonen
- Produkten ska inte användas för att blötlägga eller desinficera kontaktlinser
- För att undvika kontaminering ska du inte röra vid droppspetsen.
- Används inom 90 dagar efter första öppnandet / Kasta produkten 90 dagar efter att den har öppnats
- Använd inte efter utgångsdatumet
- För vuxna – kan användas av barn under 16 år under uppsikt

Denna produkt bör inte användas på barn under 2 år utan inrådan av vårdpersonal, eftersom den innehåller bor och kan påverka framtida fertilitet negativt.

Allvarliga incidenter som inträffar under användningen av denna medicintekniska produkt eller som en följd av dess användning ska anmälas till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där du befinner dig

FÖRVARA UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN.

FÖRVARING

Förvaras vid 5–30 °C.

Undvik direkt solljus.

Använd inte om förpackningen är öppnad eller skadad



East Midlands Pharma Ltd
Unit 1 Rothley Lodge, Loughborough Road
Rothley, Leicestershire, LE7 7NL, Förenade
kungariket

Advena Ltd, Tower Business Centre,
2^{och} Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



5°C 30°C



2797



Revisionshistorik

Revidering	Datum	Beskrivning
01	4 juni 2026	Ny elektronisk bruksanvisning (märkesspecifik)